



Produktkatalog Lymphologie



Mit neuer Farb- und Mustervielfalt und der mediven Flachstrick Versorgungslogik

Cosanum AG • Brandstrasse 28 • 8952 Schlieren • Schweiz
T +41 43 433 66 77 • ortho.order@cosanum.ch • www.cosanum.ch

medi. ich fühl mich besser.

Catalogue produits lymphologie

Produktkatalog Lymphologie

Catalogue de produits Lymphologie



Avec une nouvelle variété de coloris et de motifs et le principe de soin mediven du tricot plat



medi. I feel better.



6

Übersichten mediven

Versorgungslogik
Produkt-Eigenschaften
Kompressionsstrumpf-Rezept

Von der Indikation zum
optimalen Hilfsmittel.



16

mediven® 550 Bein

Stark. Wandstabil.
Zuverlässiger Halt.



22

mediven® cosy

Flexibel. Anschmiegsam.
Bewegungsfreiheit.



28

mediven mondi

Weich. Fein. Schöne Optik.

34

Übersichten mediven Beinqualitäten

Farben, Muster und Zusätze



44

mediven 550 Arm

Stark. Wandstabil.
Zuverlässiger Halt.



48

mediven mondi esprit

Weich. Fein. Schöne Optik.



52

mediven harmony

Rundgestrickter Armstrumpf
in sieben Seriengrößen.

58

Übersichten mediven Armqualitäten

Farben, Muster und Zusätze



66

medi Zubehör

medi Pflegeprodukte
medi An- und Ausziehhilfen
medi Butler
Therapiehilfen

76

Service

medi e-shop
www.medi.de

Versorgungslogik mediven® Flachstrick Bein



medi Tipp:

Wir beziehen uns bei den Indikationen auf die aktuelle S2k-Leitlinie Medizinische Kompressionstherapie¹, die S1-Leitlinie Lipödem² sowie die S2k-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Lymphödeme³. Für die Versorgung mit Hilfsmitteln zur Kompressionstherapie sind die jeweils gültigen Leitlinien zu beachten.⁴

Schritt 1: Indikation

Indikation	mediven® 550 Bein	mediven® cosy	mediven mondi®
Lymphödem primär und sekundär	●	●	●
Lipödem	●	●	●
Narbenbehandlung	●	●	●
Postoperative und posttraumatische Ödeme	●	●	●
Mischformen: Phlebo-Lymphödem, Lipo-Lymphödem	●	●	
Schwere chronisch venöse Insuffizienz			●

Schritt 2: Stadium berücksichtigen

Indikation	Diagnose	Charakteristika	mediven® 550 Bein	mediven® cosy	mediven mondi®
 <p>Stadium 3</p>	Stadium 1	Glatte Hautoberfläche, punktuell einheitliche Verdickung der Unterhaut	●	●	●
	Stadium 2	Wellenartige Hautoberfläche, knotenartige Strukturen in verdickter Unterhaut	●	●	●
	Stadium 3	Grobknotige Hautoberfläche, Umfangsvermehrung mit überhängenden Gewebeanteilen	●	●	
 <p>Stadium 2</p>	Stadium 1	Spontan reversibel, Ödem von weicher Konsistenz, Hochlagern reduziert die Schwellung, Delle leicht eindrückbar	●	●	●
	Stadium 2	Nicht spontan reversibel, verhärtetes Ödem, Hochlagern beseitigt die Schwellung nicht, Delle schwer eindrückbar	●	●	●
	Stadium 3	Unförmige Schwellung mit extremen Ausmaßen, stark verhärtete Haut, Entstehung von Bläschen und Fisteln	●		
















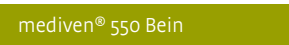
¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.03.2021)

² Reich-Schupke S et al. S1-Leitlinie Lipödem. Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-012.html> (Letzter Zugriff 08.03.2021)

³ Oberlin M et al. S2k-Leitlinie: Diagnostik und Therapie der Lymphödeme. Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/058-001.html> (Letzter Zugriff 08.03.2021)

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir die mediven Flachstrick-Produkte für Patienten mit folgenden Charakteristika.*

Schritt 3: Patientenindividuelle Kriterien berücksichtigen

Kriterien	Material**		
	Leicht z. B. mediven mondi®	Mittel z. B. mediven® cosy	Stark z. B. mediven® 550 Bein
Bindegewebe			
	normal bis fest	weich bis fest	sehr weich bis verhärtet
Gewicht			
Vertiefte Hautfalten / Kalibersprünge	keine	moderat	stark
Schweregrad der Erkrankung			
Empfohlener mediven Kompressionsstrumpf:	 mediven mondi®		
	 mediven® cosy		
			 mediven® 550 Bein

Empfehlung:

**Wandstabilität

- Je **weicher** das Bindegewebe,
- Je **höher** das Gewicht,
- Je **stärker** die Hautfalten / Kalibersprünge,
- Je **schwerer** die Erkrankung,

→ umso **wandstabiler** sollte das Strumpfmateriale sein.

→ Entscheidend für die Material-Auswahl ist jeweils das Kriterium mit der schwersten Ausprägung.

Auch online unter:
www.medi.biz/fs-versorgungslogik

* Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt. Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.

Versorgungslogik mediven® Flachstrick Arm

medi Tipp:

Wir beziehen uns bei den Indikationen auf die aktuelle S2k-Leitlinie Medizinische Kompressionstherapie¹, die S1-Leitlinie Lipödem² sowie die S2k-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Lymphödeme³. Für die Versorgung mit Hilfsmitteln zur Kompressionstherapie sind die jeweils gültigen Leitlinien zu beachten.⁴

Schritt 1: Indikation

Indikation	mediven® 550 Arm	mediven® mondi esprit
Lymphödem primär und sekundär	●	●
Lipödem	●	●
Narbenbehandlung	●	●
Postoperative und posttraumatische Ödeme	●	●

Schritt 2: Stadium berücksichtigen

Indikation	Diagnose	Charakteristika	mediven® 550 Arm	mediven® mondi esprit
 Stadium 2	Stadium 1	Glatte Hautoberfläche, punktuell einheitliche Verdickung der Unterhaut	●	●
	Stadium 2	Wellenartige Hautoberfläche, knotenartige Strukturen in verdickter Unterhaut	●	●
	Stadium 3	Grobknotige Hautoberfläche, Umfangsvermehrung mit überhängenden Gewebeanteilen	●	
 Stadium 3	Stadium 1	Spontan reversibel, Ödem von weicher Konsistenz, Hochlagern reduziert die Schwellung, Delle leicht eindrückbar	●	●
	Stadium 2	Nicht spontan reversibel, verhärtetes Ödem, Hochlagern beseitigt die Schwellung nicht, Delle schwer eindrückbar	●	●
	Stadium 3	Unförmige Schwellung mit extremen Ausmaßen, stark verhärtete Haut, Entstehung von Bläschen und Fisteln	●	







¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.03.2021)

² Reich-Schupke S et al. S1-Leitlinie Lipödem. Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-012.html> (Letzter Zugriff 08.03.2021)

³ Oberlin M et al. S2k-Leitlinie: Diagnostik und Therapie der Lymphödeme. Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/058-001.html> (Letzter Zugriff 08.03.2021)

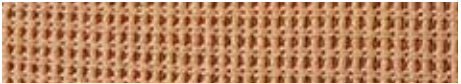Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir die mediven Flachstrick-Produkte für Patienten mit folgenden Charakteristika.*

Schritt 3: Patientenindividuelle Kriterien berücksichtigen

Kriterien	Material**	
	Leicht / Mittel z. B. mediven® mondi esprit	Stark z. B. mediven® 550 Arm
Bindegewebe		
	normal bis fest	sehr weich bis verhärtet
Gewicht		
Vertiefte Hautfalten / Kalibersprünge	keine / moderat	moderat / stark
Schweregrad der Erkrankung		
Empfohlener mediven Kompressionsstrumpf:	mediven® mondi esprit	mediven® 550 Arm

Empfehlung:

**Wandstabilität

- Je **weicher** das Bindegewebe,
- Je **höher** das Gewicht,
- Je **stärker** die Hautfalten / Kalibersprünge,
- Je **schwerer** die Erkrankung,

→ umso **wandstabiler** sollte das Strumpfmateriale sein.

→ Entscheidend für die Material-Auswahl ist jeweils das Kriterium mit der schwersten Ausprägung.

**Auch online unter:
www.medi.biz/fs-versorgungslogik**

* Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes, noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt. Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patientin / des Patienten.

mediven® Produkt-Eigenschaften



Clima Comfort* für

- Raschen Abtransport von Feuchtigkeit von der Hautoberfläche
- Hohe Atmungsaktivität



Integrierte Clima Fresh Funktion

- Wirkt antibakteriell
- Hemmt somit geruchsbildende Bakterien



Perfect Fit

- Hohe Passgenauigkeit
- Medizinisch wirksamer Druckverlauf
- Optimale Versorgungsbedingungen bei Serie und Maß



Große Vielfalt an Varianten und Sonderausführungen

Farben für mehr Lebensqualität

- Alle Standardfarben sind sofort verfügbar
- Trendfarben binnen 10 Arbeitstagen lieferbar

Pflegeleicht

- Für Waschmaschine und Trockner im Schongang geeignet

mediven Kompressionsstrümpfe sind latexfrei.



* Clima Comfort

Wissenschaftlich getestet vom französischen Institut IFTH. Das Testergebnis zeigt, dass die Clima Comfort-Technologie von medi den Klimaausgleich zwischen Haut und Strumpf gewährleistet. medi erreicht eine hervorragende Gesamtbewertung mit 11 von 12 Punkten.

mediven[®] 550 Bein

Stark. Wandstabil. Zuverlässiger Halt.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir mediven 550 Bein für:

- Sehr weiches bis verhärtetes Bindegewebe
- Starke Hautfalten / Kalibersprünge
- Begleitende Adipositas
- Ausgeprägte Lymphödeme

Indikationen²

- Primäre und sekundäre Lymphödeme in den Stadien 1, 2 und 3
- Lipödeme in den Stadien 1, 2 und 3
- Narbenbehandlung
- Postoperative und posttraumatische Ödeme
- Mischformen: Phlebo-Lymphödem, Lipo-Lymphödem

Eigenschaften

- Sehr hohe Wandstabilität
- Hoher Arbeitsdruck
- Festes, starkes Gestrick
- Hohe Strapazierfähigkeit


Besonderheiten

- Große Auswahl an Zusätzen (Hallux-Entlastungszone, Funktionszonen, Po-Forming)
- Zahlreiche Varianten, z. B. Beinsegmente für Doppel- und mehrteilige Versorgungen
- UV-Schutzfaktor 40
- Geruchshemmende Wirkung durch Clima Fresh
- Atmungsaktives Gestrick dank Clima Comfort




- Modische Vielfalt: 6 Standardfarben, 5 Trendfarben und 4 Muster zur Kombination für Design-Elemente und Fashion-Elemente
- Auf Wunsch mit funkelnden Kristallen veredelbar

Waschanleitung

Pflegeleicht     

für Waschmaschine und Trockner geeignet

Lieferbare Varianten

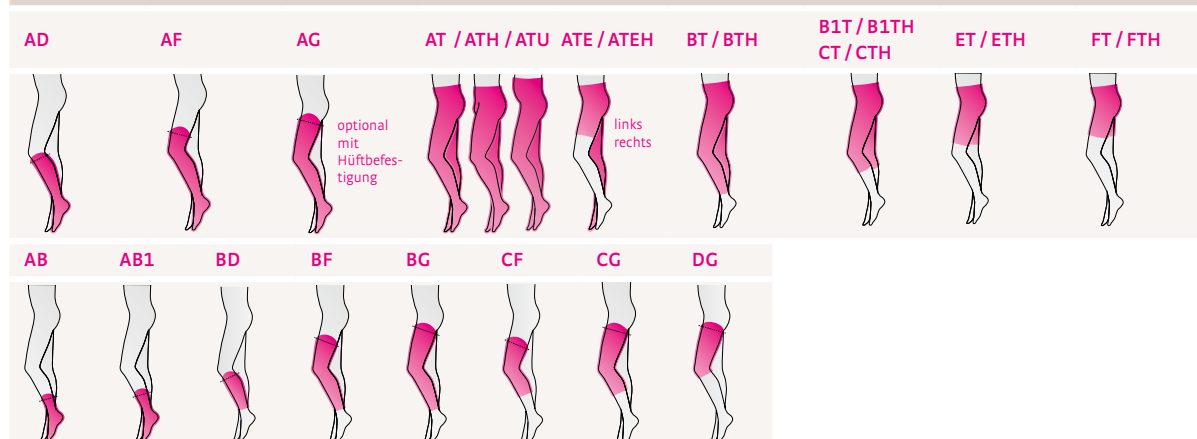

Produkt-Vorteile




Standard-Ausführungen

Maßanfertigung	Ausschließlich
Abschluss proximal	Flache Schräge bei allen Strumpf-Varianten
Ausführungen	Flache Schräge im Oberschenkel-Bereich und Lochband bei allen Hosen-Varianten
Zwickel / Leibteil	Standardversion für Damen: AT mit 3D-Leibteil (kompressiv) Herren-Zwickel: ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH nichtkompressives Leibteil vorne: ATU, ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU
Fußteil	Schräger, offener Fuß

Material-Zusammensetzung

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	23 %	77 %
CCL 2	25 %	75 %
CCL 3	28 %	72 %
CCL 4	32 %	68 %

medi Tipp:

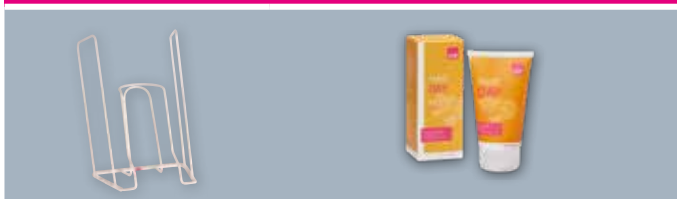

medi Butler erleichtern das Anziehen⁴

medi Haut- und Gestrickpflege bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 70

Kompressionsklasse


CCL 1, 2, 3, 4

Ödem-Stadium




Farben

Standardfarben

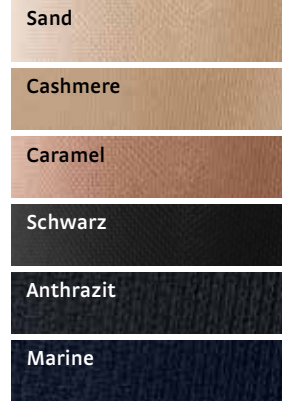


Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage

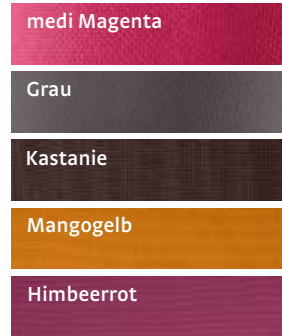

Muster³

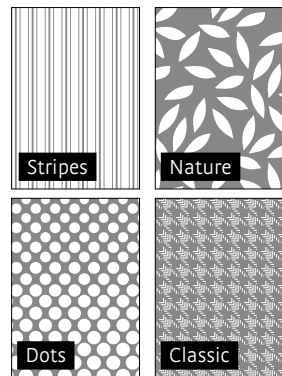

Erhältlich mit funkelnden Kristallen.



¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.

³ Die Design-Elemente und Fashion-Elemente sind mit allen Standard- und Trendfarben frei kombinierbar. Den Aufpreis für die Fashion-Elemente finden Sie in der aktuellen Preisliste.

⁴ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 02.03.2020)

mediven® 550 Zehenkappe

Stark. Wandstabil. Zuverlässiger Halt.

Indikationen¹

- Patienten mit Lymphödem in den Zehen (Stemmer positiv) und auf dem Fußrücken

Eigenschaften

- Zehenkappe mit Clima Fresh: hemmt Geruch und Einnisten von Bakterien
- Boden-Deckel-Prinzip:
 - Nahtverlagerung an die Ober- und Unterseite der Zehen (keine Nähte zwischen den Zehen)
 - Maßanfertigung jeder einzelnen Zehe
- medi Tipp: optionale Einarbeitung von medi Lymphpads für zusätzlichen Druck beim Fußrücken-Lymphödem



Durchgestrickte Zehenkappe

- Mehr Sicherheit bei der Vermessung (Berechnung Überlappungsbereich entfällt)
- Indikationsgerechte Versorgung für optimalen Lymphfluss (keine zirkulären Nähte)
- Angenehmes Tragegefühl, ohne zirkuläre Nähte
- Hervorragender Halt, ohne Verrutschen
- Erhältlich bei den Varianten AB, AB1, AD, AF, AG, AT, ATH, ATU, ATE/ATEH
- Unterschiedliche Kompressionsklassen im Bein- und Zehenbereich möglich



Einzelne Zehenkappe

- Erhöhung der Wandstabilität durch Doppelbestrumpfung bei stark ausgeprägten Ödemen am Fußrücken
- Individuelle Versorgungsmöglichkeiten, z. B. Nachtversorgung oder Kombination mit anderen Produktvarianten
- Nahtverlagerung auf die Fußunterseite mittig (seitliche Naht als Sonderwunsch möglich)

medi Tipp:

Die einzelne Zehenkappe sorgt für leichtes und schnelles An- und Ausziehen.

Produkt-Vorteile



Kompressionsklasse


CCL 1, 2, 3

Ödem-Stadium



Farben

Standardfarben

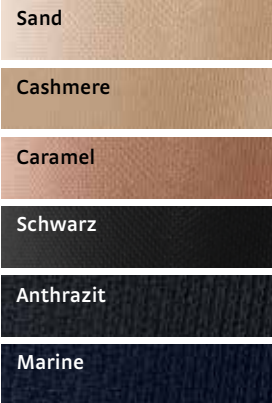


Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage



Muster^{2,3}

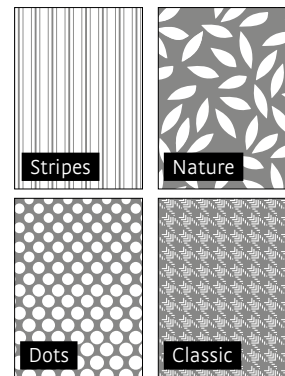

Lieferbare Varianten



Hinweis

Schon gewusst?

- 82 % aller Lymphödem-Patienten zeigen ein positives Stemmer'sches Zeichen.*
 - 63 % aller Lymphödem-Patienten zeigen eine Schwellung des Fußrückens.*
- Zur optimalen Versorgung dieser Patienten ist eine Zehenkappe empfehlenswert.

* Quelle: Dr. Schingale „Lymphödeme Lipödeme – Diagnose und Therapie – Ein Ratgeber für Betroffene“

¹ Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.
² Die Design- und Fashion-Elemente können mit den Standard- und Trendfarben frei kombiniert werden.
³ Die Fashion-Elemente sind gegen einen Aufpreis erhältlich.

mediven[®] cosy

Flexibel. Anschmiegsam. Bewegungsfreiheit.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir mediven cosy für:

- Weiches bis festes Bindegewebe
- Moderate Hautfalten / Kalibersprünge
- Begleitende Adipositas
- Lipödem-Patienten
- Reisen und Sport

Indikationen²

- Primäre und sekundäre Lymphödeme in den Stadien 1 und 2
- Lipödem in den Stadien 1, 2 und 3
- Narbenbehandlung
- Postoperative und posttraumatische Ödeme
- Mischformen: Phlebo-Lymphödem, Lipo-Lymphödem

Eigenschaften

- Mittlere Wandstabilität
- Hohe Längsverdehnung
- Flexibles, weiches Gestrick
- Hohe Strapazierfähigkeit

Besonderheiten

- Leichtes Anziehen durch flexibles, längszüliges Gestrick
- Spezielle anatomische Fußform
- Strapazierfähiges Gestrick auch an Fußsohle und Ferse für lange Haltbarkeit
- Große Auswahl an Zusätzen (Hallux-Entlastungszone, Funktionszonen, Po-Forming)




- Zahlreiche Varianten, z. B. Beinsegregate für Doppel- und mehrteilige Versorgungen
- UV-Schutzfaktor 80
- Geruchshemmende Wirkung durch Clima Fresh
- Atmungsaktives Gestrick dank Clima Comfort
- Modische Vielfalt: 6 Standardfarben, 5 Trendfarben und 4 Muster zur Kombination für Design-Elemente und Fashion-Elemente
- Auf Wunsch mit funkelnden Kristallen veredelbar

Waschanleitung

Pflegeleicht

für Waschmaschine und Trockner geeignet

Lieferbare Varianten

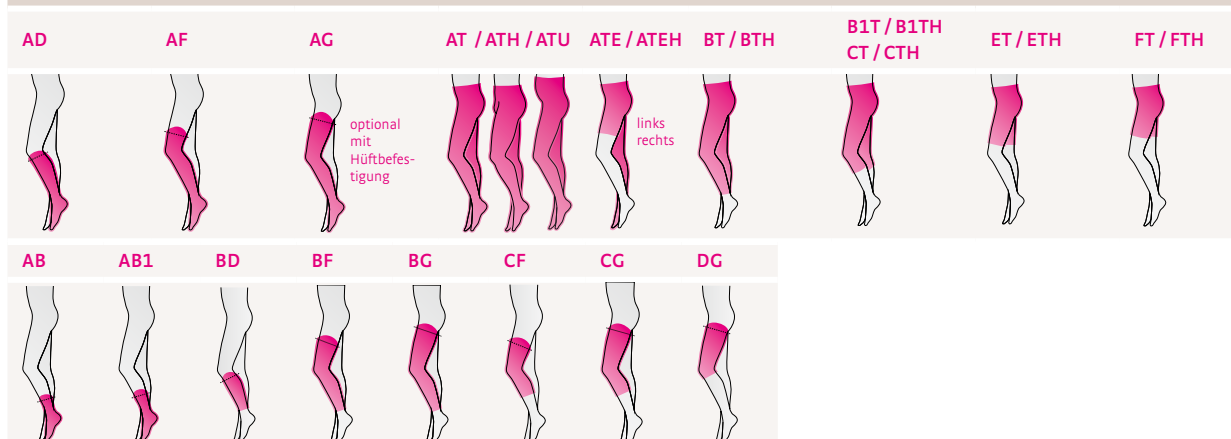

Produkt-Vorteile



Clima Comfort

Clima Fresh

Vielfalt

Perfect Fit

Anatomic Fit



Standard-Ausführungen

Maßanfertigung	Ausschließlich
Abschluss proximal	Flache Schräge bei allen Strumpf-Varianten
Ausführungen	Flache Schräge im Oberschenkel-Bereich und Lochband bei allen Hosen-Varianten
Zwickel / Leibteil	Standardversion für Damen: AT mit 3D-Leibteil (kompressiv) Herren-Zwickel: ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH nichtkompressives Leibteil vorne: ATU, ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU
Fußteil	Schräger, offener Fuß

Material-Zusammensetzung

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	15 %	85 %
CCL 2	20 %	80 %
CCL 3	28 %	72 %

Kompressionsklasse


CCL 1, 2, 3

Ödem-Stadium



Farben

Standardfarben

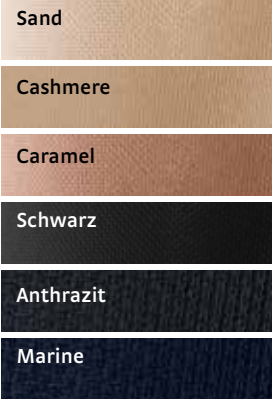


Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage




Muster³

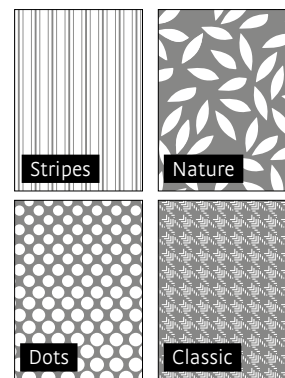

Erhältlich mit Kristallen.



medi Tipp:

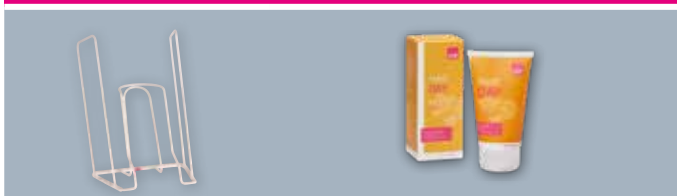

medi Butler erleichtern das Anziehen⁴

medi Haut- und Gestrickpflege bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 70

- ¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.
- ² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.
- ³ Die Design-Elemente und Fashion-Elemente sind mit allen Standard- und Trendfarben frei kombinierbar. Die Fashion-Elemente sind gegen einen Aufpreis erhältlich.
- ⁴ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.03.2021)

mediven® cosy Zehenkappe

Flexibel. Anschmiegsam. Bewegungsfreiheit.

Indikationen¹

- Patienten mit Lymphödem in den Zehen (Stemmer positiv) und auf dem Fußrücken

Eigenschaften

- Zehenkappe mit Clima Fresh: hemmt Geruch und Einnisten von Bakterien
- Boden-Deckel-Prinzip:
 - Nahtverlagerung an die Ober- und Unterseite der Zehen (keine Nähte zwischen den Zehen)
 - Maßanfertigung jeder einzelnen Zehe
- medi Tipp: optionale Einarbeitung von medi Lymphpads für zusätzlichen Druck beim Fußrücken-Lymphödem



Durchgestrickte Zehenkappe

- Mehr Sicherheit bei der Vermessung (Berechnung Überlappungsbereich entfällt)
- Indikationsgerechte Versorgung für optimalen Lymphfluss (keine zirkulären Nähte)
- Angenehmes Tragegefühl, ohne zirkuläre Nähte
- Hervorragender Halt, ohne Verrutschen
- Erhältlich bei den Varianten AB, AB1, AD, AF, AG, AT, ATH, ATU, ATE/ATEH
- Unterschiedliche Kompressionsklassen im Bein- und Zehenbereich möglich



Einzelne Zehenkappe

- Erhöhung der Wandstabilität durch Doppelbestrumpfung bei stark ausgeprägten Ödemen am Fußrücken
- Individuelle Versorgungsmöglichkeiten, z. B. Nachtversorgung oder Kombination mit anderen Produkt-Varianten
- Nahtverlagerung auf die Fußunterseite mittig (seitliche Naht als Sonderwunsch möglich)

medi Tipp:

Die einzelne Zehenkappe sorgt für leichtes und schnelles An- und Ausziehen.

Produkt-Vorteile



Lieferbare Varianten



Hinweis

Schon gewusst?

- 82 % aller Lymphödem-Patienten zeigen ein positives Stemmer'sches Zeichen.*
 - 63 % aller Lymphödem-Patienten zeigen eine Schwellung des Fußrückens.*
- Zur optimalen Versorgung dieser Patienten ist eine Zehenkappe empfehlenswert.

* Quelle: Dr. Schingale „Lymphödeme Lipödeme – Diagnose und Therapie – Ein Ratgeber für Betroffene“

Kompressionsklasse


CCL 1, 2

Ödem-Stadium




Farben

Standardfarben

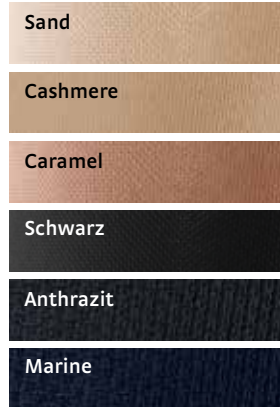


Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage

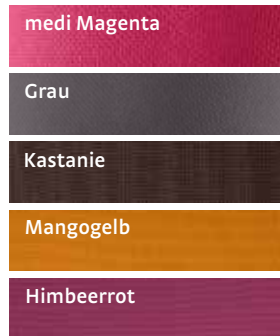

Muster^{2,3}

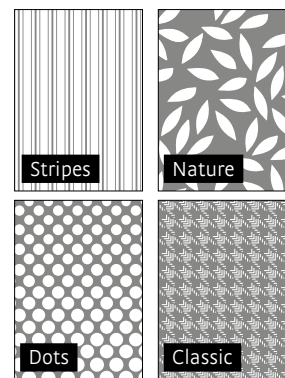

¹ Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.

² Die Design- und Fashion-Elemente können mit den Standard- und Trendfarben frei kombiniert werden.

³ Die Fashion Elemente sind gegen einen Aufpreis erhältlich.

mediven mondi®

Weich. Fein. Schöne Optik.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir mediven mondi für:

- Normales bis festes Bindegewebe
- Keine Hautfalten / Kalibersprünge
- Normalgewicht (normale Beinform)
- Atopische Dermatitis (mediven mondi mit Silber-Segmenten)

Indikationen²

- Primäre und sekundäre Lymphödeme in den Stadien 1 und 2
- Lipödeme in den Stadien 1 und 2
- Narbenbehandlung
- Postoperative und posttraumatische Ödeme
- Schwere chronisch venöse Insuffizienz (z.B. Rezidivprophylaxe des Ulcus cruris venosum)

Eigenschaften

- Leichte Wandstabilität
- Hohe Querverdehnung
- Weiches, feines Gestrick
- Hohe Strapazierfähigkeit

Besonderheiten

- Mit Silber-Segmenten erhältlich: Y-C, Y-D, Y-G, A-C, A-D, A-G
 - Antibakterielle Wirkung, z. B. für Patienten mit atopischer Dermatitis
 - Segmente ermöglichen gezielten und kosteneffizienten Einsatz
- Viele Kombinationsmöglichkeiten mit besonderen Zusätzen, wie Y-Einkehre
- UV-Schutzfaktor 80
- Geruchshemmende Wirkung durch Clima Fresh




- Atmungsaktives Gestrick dank Clima Comfort
- Modische Vielfalt: 6 Standardfarben und 5 Trendfarben
- Auf Wunsch mit funkelnden Kristallen veredelbar

Waschanleitung

Pflegeleicht für

Waschmaschine und Trockner geeignet

medi Tipp:

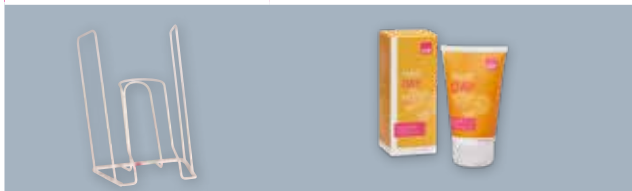

medi Butler erleichtern das Anziehen³

medi Haut- und Gestrickpflege bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 70

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.

³ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 02.03.2020)

Produkt-Vorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Vielfalt



Perfect Fit



Anatomic Fit



Standard-Ausführungen

Maßanfertigung	Ausschließlich
Abschluss proximal	Flache Schräge bei allen Strumpf-Varianten
Ausführung	Flache Schräge im Oberschenkel-Bereich und Lochband bei allen Hosen-Varianten
Zwickel / Leibteil	Standardversion für Damen: AT mit 3D-Leibteil (kompressiv) Herren-Zwickel: ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH nichtkompressives Leibteil vorne: ATU, ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU
Fußteil	Schräger, offener Fuß
Lieferbare Silber-Segmente	Y-C, Y-D, Y-G, A-C, A-D, A-G


Material-Zusammensetzung mediven mondi

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL1	22 %	78 %
CCL2	24 %	76 %
CCL3	28 %	72 %

Material-Zusammensetzung mediven mondi mit Silbergarn

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)	Silberauflage
CCL1	22 %	77 %	1 %
CCL2	24 %	75 %	1 %
CCL3	28 %	71 %	1 %

Lieferbare Varianten

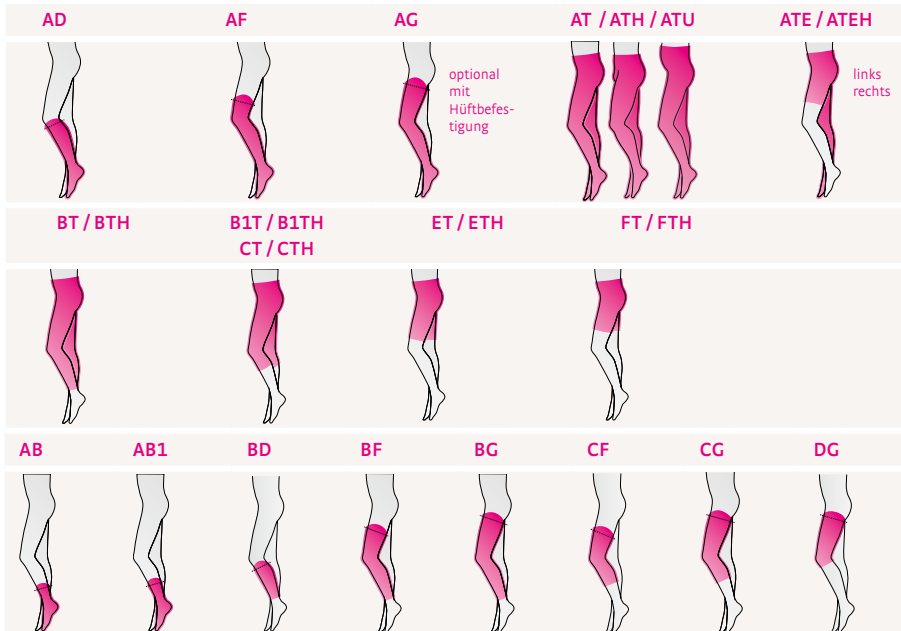

Kompressionsklasse


CCL 1, 2, 3

Ödem-Stadium




Farben

Standardfarben

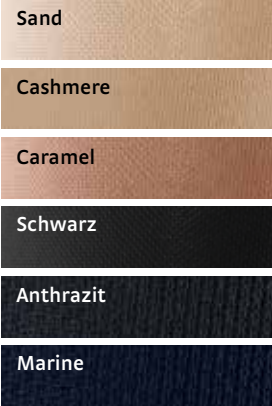

Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage

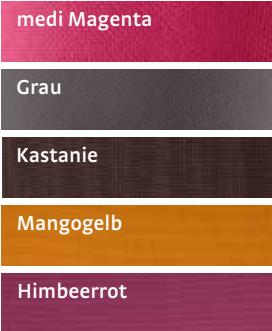

Erhältlich mit funkelnden Kristallen.



mediven mondi® Zehenkappe

Weich. Fein. Schöne Optik.

Indikationen¹

- Patienten mit Lymphödem in den Zehen (Stemmer positiv) und auf dem Fußrücken

Eigenschaften

- Zehenkappe mit Clima Fresh: hemmt Geruch und Einnisten von Bakterien
- Boden-Deckel-Prinzip:
 - Nahtverlagerung an die Ober- und Unterseite der Zehen (keine Nähte zwischen den Zehen)
 - Maßanfertigung jeder einzelnen Zehe



Durchgestrickte Zehenkappe

- Mehr Sicherheit bei der Vermessung (Berechnung Überlappungsbereich entfällt)
- Indikationsgerechte Versorgung für optimalen Lymphfluss (keine zirkulären Nähte)
- Angenehmes Tragegefühl, ohne zirkuläre Nähte
- Hervorragender Halt, ohne Verrutschen
- Erhältlich bei den Varianten AB, AB1, AD, AF, AG, AT, ATH, ATU, ATE/ATEH
- Unterschiedliche Kompressionsklassen im Bein- und Zehenbereich möglich



Einzelne Zehenkappe

- Erhöhung der Wandstabilität durch Doppelbestumpfung bei stark ausgeprägten Ödemen am Fußrücken
- Individuelle Versorgungsmöglichkeiten, z. B. Nachtversorgung oder Kombination mit anderen Produkt-Varianten
- Nahtverlagerung auf die Fußunterseite mittig (seitliche Naht als Sonderwunsch möglich)

medi Tipp:

Die einzelne Zehenkappe sorgt für leichtes und schnelles An- und Ausziehen.

Produkt-Vorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Vielfalt



Perfect Fit



Anatomic Fit



Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Ödem-Stadium



Farben

Standardfarben

Sand

Cashmere

Caramel

Schwarz

Anthrazit

Marine

Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage

medi Magenta

Grau

Kastanie

Mangogelb

Himbeerrot

Lieferbare Varianten

Zehenkappe geschlossen



Zehenkappe geschlossen, ohne kleine Zehe



Zehenkappe offen



Zehenkappe offen, ohne kleine Zehe



Hinweis












Schon gewusst?

- 82 % aller Lymphödem-Patienten zeigen ein positives Stemmer'sches Zeichen.*
 - 63 % aller Lymphödem-Patienten zeigen eine Schwellung des Fußrückens.*
- Für eine optimale Versorgung dieser Patienten ist eine Zehenkappe empfehlenswert.

* Quelle: Dr. Schingale „Lymphödeme Lipödeme – Diagnose und Therapie – Ein Ratgeber für Betroffene“





¹ Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.

mediven® Flachstrick-Beinqualitäten Farbspektrum

Farbe		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
Standardfarben				
Sand		•	•	•
Cashmere		•	•	•
Caramel		•	•	•
Schwarz		•	•	•
Anthrazit		•	•	•
Marine		•	•	•
Trendfarben (Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage)				
medi Magenta		•	•	•
Grau		•	•	•
Kastanie		•	•	•
Mangogelb		•	•	•
Himbeerrot		•	•	•

Alle aktuellen Trendfarben zu unseren Flachstrick-Qualitäten finden Sie im [medi e-shop](#).

mediven® Flachstrick-Beinqualitäten Muster

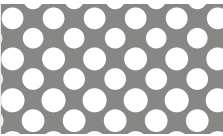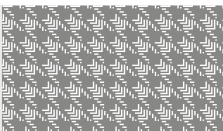Muster		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
Stripes			•	•
Nature			•	•
Dots			•	•
Classic			•	•

Einfach medi:
Design- und Fashion-
Elemente sind für alle
Standard- und
Trendfarben
erhältlich



Fashion-Element



Design-Element

Funkelnde Kristalle		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
Motive³ (Positionierung an der Fessel-Außenseite)				
Wind in Gold		•	•	•
Proud in Athrazit		•	•	•
Trio in Silber		•	•	•

¹ Die Design- und Fashion-Elemente können mit den Standard- und Trendfarben frei kombiniert werden.

² Die Fashion-Elemente sind gegen einen Aufpreis erhältlich.


³ Die funkelnden Kristalle sind gegen einen Aufpreis erhältlich.

mediven® Flachstrick Beinqualitäten Zusätze

Zusatz		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
Haftbänder				
Haftbänder 5 cm				
Noppen-Haftband		•	•	•
Noppen-Haftband mit Motiv		•	•	•
Mikronoppen-Haftband sensitiv		•	•	•
Flächen-Haftband Rose		•	•	•
Haftbänder 2,5 cm				
Noppen-Haftband		•	•	•
Haftbandstücke				
Segmente aus Noppen-, Mikronoppen- oder Flächen-Haftband <ul style="list-style-type: none"> • Entlang Schräge • Längs über „E“ • Längs hinten über Naht • Längs in Schräge bei AD • Auf Leibteilnaht seitlich • Im Leibteil • Auf Strumpf quer über A1 • Auf Fußsohle 		•	•	•
Anti-Rutsch-Noppen				
Segmente aus Silikonoppen <ul style="list-style-type: none"> • Entlang Schräge (1 Segment) • Entlang Schräge (2 Segmente nebeneinander) • Längs über „E“ • Längs hinten über Naht • Auf Fußsohle • Im Leibteil vorne (Segment links + rechts) • Im Leibteil hinten (Segment links + rechts) 		•	•	•
Haftband am distalen Beinabschluss				
Haftband (schmal) am Beinabschluss bei Hosen-Varianten ohne Fußteil		•	•	•
Alternative Befestigungen				
Hüftbefestigung		•	•	•
Hosenträger		•	•	•

Zusatz		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
Verschlüsse				
Reißverschluss		•	•	•
Klettverschluss		•	•	•
Haken-Ösen-Band		•	•	•
Pelotten und Futterstoff				
Lymphpad inkl. eingearbeiteter Tasche		•	•	•
• Lymphpad gerippt		•	•	•
• Lymphpad fein genoppt		•	•	•
• Lymphpad grob genoppt		•	•	•
Silikonpelotten		•	•	•
Tasche für Lymphpad oder Pelotte		•	•	•
Futterstoff		•	•	•
Pelotten mit Stoff überzogen		•	•	•

Zusatz		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
Abschlüsse				
Abschluss Bein (proximal)				
Proximal flache Schräge (Standard)		•	•	•
Proximal steile Schräge		•	•	•
Proximal gerader Abschluss		•	•	•
Oberbeinerhöhung				
Verlängerung der Oberschenkelvorderseite		•	•	•
Knie-Funktionszone				
Spezielles Gestrück für die Kniescheibe und Kniebeuge			•	•
Ellipsenform E				
Elliptische Verlängerung der Knievorderseite		•	•	•
Strickmarkierung				
Maschenerhebung auf Höhe Messpunkt D		•	•	•
Bein andere CCL				
Unterschiedliche CCL der beiden Beinteile		•	•	•
Poröse Reihen				
Kompressionsschussfaden nur in jeder zweiten Reihe		•	•	•

Zusatz		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
Leibteil				
Leibteil-Varianten				
Leibteil AT (3D-Leibteil) Standard-Version für Frauen		•	•	•
Leibteil-Variante AT/U Umstandsleibteil		•	•	•
Leibteil-Variante AT/H Leibteil mit eingearbeitetem Herrenzwickel		•	•	•
Po-Forming			•	•
Abschluss Leibteil				
Lochband (Standard)		•	•	•
Taillenband		•	•	•
Taillenband verstellbar		•	•	•
Strickrand		•	•	•
Haftbänder (Noppen-Haftband)		•	•	•

Zusatz		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
Suspensorium – nach Maß gefertigter Herrenzwickel				
Trikotmaterial (Standard)		•	•	•
Netzmaterial		•	•	•
Kompressives Strickmaterial		•	•	•
Schrittzwickel – taillierter Zwickel mit erhöhtem Plateau vorne und hinten				
Trikotmaterial (Standard)		•	•	•
Netzmaterial		•	•	•
Kompressives Strickmaterial		•	•	•
Leibteil andere CCL				
Leibteil in niedrigerer CCL		•	•	•
Querschlitze				
Quer überlappender Eingriff bei Herren-Leibteilen		•	•	•
Offener Schritt				
Hosenversorgung ohne eingenähten Zwickel		•	•	•
Stoma-Öffnung				
Individuelle Lochöffnung im Leibteil-Bereich		•	•	•
Fuß				
Fußspitze				
Offene Fußspitze (Standard)		•	•	•
Geschlossene Fußspitze		•	•	•
Abschluss Fuß (distal)				
Distal schräger Fußabschluss (Standard)		•	•	•
Distal gerader Fußabschluss		•	•	•
Hallux-Entlastungszone				
Flexibles Gestrick im Bereich des Hallux valgus			•	•
Schneiderballen-Entlastungszone				
Flexibles Gestrick im Bereich des Schneiderballens			•	•
Spitzfuß				
Steilstellung des Fußteils		•	•	•

Zusatz		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
Softspitze				
Besonders weiches und elastisches Gestrick für den Fußspitzenbereich				•
Unterfußverlängerung				
Verlängerung des kompressiven Gestricks an der Fußsohle		•	•	•
Y-Einkehre				
90°-Stellung des Fußes durch zusätzliche Einkehren im Spannungsbereich		•	•	•
Fußspitze rund abnähen				
Rund abgenähte Trikotspitze		•	•	•
Seitliche Naht				
Seitliche Naht bei einzelner Zehenkappe		•	•	•
Zehenfach für Großzehe				
Separates Zehenfach für Großzehe		•		•
Fersensteg				
Fersensteg für Leggings		•	•	•
Silber-Segmente				
Silbereinstrickung Y-C, Y-D, Y-G A-C, A-D, A-G		•		
Stumpfvarianten				
Stumpfende flach (Kreis)		•	•	•
Stumpfende anatomisch (Stumpfspitze)		•	•	•
Nahtvarianten				
Band auf Naht		•	•	•
Kettelnahrt		•	•	•
Etikett außen anbringen		•	•	•

mediven® 550 Arm

Stark. Wandstabil. Zuverlässiger Halt.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir mediven 550 Arm für:

- Sehr weiches bis verhärtetes Bindegewebe
- Moderate bis starke Hautfalten / Kalibersprünge
- Begleitende Adipositas
- Ausgeprägte Lymphödeme

Indikationen²

- Primäre und sekundäre Lymphödeme in den Stadien 1, 2 und 3
- Lipödeme in den Stadien 1, 2 und 3
- Postoperative und posttraumatische Ödeme
- Narbenbehandlung

Eigenschaften

- Hohe Wandstabilität
- Hoher Arbeitsdruck
- Festes, starkes Gestrick
- Hohe Strapazierfähigkeit


Besonderheiten

- Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit besonderen Zusätzen
- Zahlreiche Varianten, z. B. Armstulpen für Doppel- und mehrteilige Versorgungen
- UV-Schutzfaktor 20
- Geruchshemmende Wirkung durch Clima Fresh
- Atmungsaktives Gestrick dank Clima Comfort
- Modische Vielfalt: 6 Standardfarben, 5 Trendfarben und 4 Muster zur Kombination für Design-Elemente und Fashion-Elemente
- Auf Wunsch mit funkelnden Kristallen veredelbar

Waschanleitung

Pflegeleicht

für Waschmaschine und Trockner geeignet

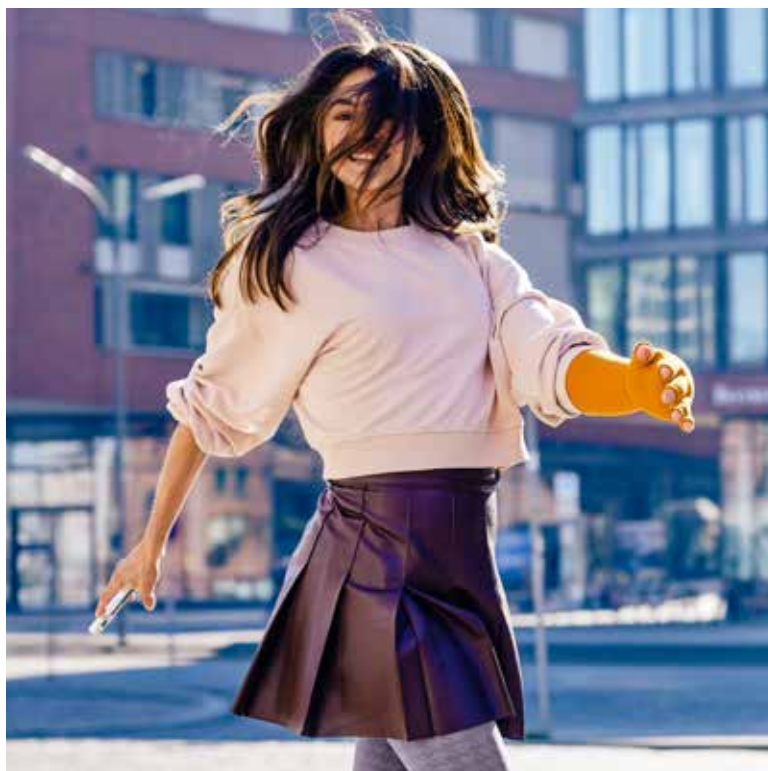

Lieferbare Varianten

AD

verlängerter Handschuh bis D



AE

verlängerter Handschuh bis E



AF

Armbandage mit Hand bis F



AG

Armbandage mit Hand bis G



CD

Armbandage ohne Hand bis D



CE

Armbandage ohne Hand bis E



CF

Armbandage ohne Hand bis F



CG

Armbandage ohne Hand bis G



DG

Armstulpe




EG

Armstulpe



Bolero-
verbindung


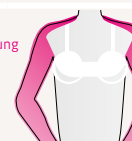


Befestigungs-
möglichkeiten

Haftband

Schulterkappe

Schulterkappe

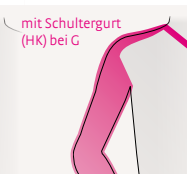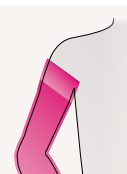

Produkt-Vorteile



Clima Comfort

Vielfalt

Perfect Fit

Anatomic Fit

Clima Fresh



Standard-Ausführungen

Maßanfertigung	Ausschließlich
Abschluss proximal	Flache Schräge bei allen Varianten, außer AC1 Poröser gerader Abschluss: AC1
Abschluss distal	Poröser gerader Abschluss: CD, CE, CF, CG
Finger	Ohne Finger mit Daumenansatz, offene / geschlossene Finger mit Daumenansatz: AE, AF, AG, AC1, AD
Fingerling	Offen oder geschlossen


Material-Zusammensetzung

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	12 %	88 %
CCL 2	16 %	84 %
CCL 3	26 %	74 %

Handteile AC1



medi Tipp:

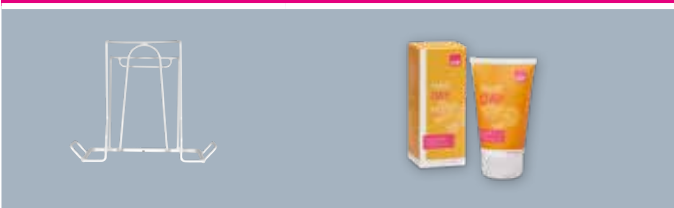

medi Butler erleichtern das Anziehen⁴

medi Haut- und Gestrickpflege bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 70

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.

³ Die Design-Elemente und Fashion-Elemente sind mit allen Standard- und Trendfarben frei kombinierbar. Die Fashion-Elemente sind gegen einen Aufpreis erhältlich.

⁴ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.03.2021)

Kompressionsklasse


CCL 1, 2, 3

Ödem-Stadium




Farben

Standardfarben

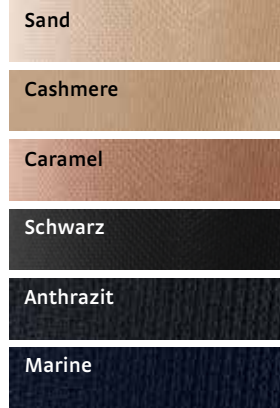


Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage

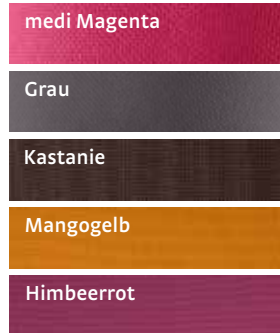

Muster³

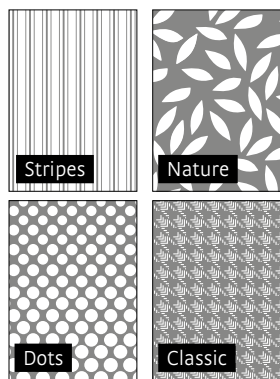

Erhältlich mit funkelnden Kristallen.



mediven[®] mondi esprit

Weich. Fein. Schöne Optik.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir mediven mondi esprit für:

- Normales bis festes Bindegewebe
- Keine / moderate Hautfalten / Kalibersprünge
- Normalgewicht

Indikationen²

- Primäre und sekundäre Lymphödeme in den Stadien 1 und 2
- Lipödeme in den Stadien 1 und 2
- Postoperative und post-traumatische Ödeme
- Narbenbehandlung

Eigenschaften

- Leichte bis mittlere Wandstabilität
- Geschmeidiges Gestrick
- Hohe Strapazierfähigkeit

Besonderheiten

- Viele Kombinationsmöglichkeiten mit besonderen Zusätzen
- Zahlreiche Varianten, z. B. Armstulpen für Doppel- und mehrteilige Versorgungen
- UV-Schutzfaktor 40
- Geruchshemmende Wirkung durch Clima Fresh
- Atmungsaktives Gestrick dank Clima Comfort
- Modische Vielfalt: 6 Standardfarben, 5 Trendfarben und 4 Muster zur Kombination für Design-Elemente und Fashion-Elemente
- Auf Wunsch mit funkelnden Kristallen veredelbar

Waschanleitung

Pflegeleicht

für Waschmaschine und Trockner geeignet



Lieferbare Varianten

AD

verlängerter Handschuh bis D



AE

verlängerter Handschuh bis E



AF

Armbandage mit Hand bis F



AG

Armbandage mit Hand bis G



CD

Armbandage ohne Hand bis D



CE

Armbandage ohne Hand bis E



CF

Armbandage ohne Hand bis F



CG

Armbandage ohne Hand bis G



DG

Armstulpe



EG

Armstulpe




Bolero-
verbindung



Befestigungs-
möglichkeiten

Haftband

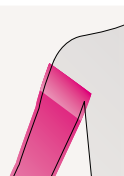

Schulterkappe



Schulterkappe



Produkt-Vorteile



Clima Comfort

Vielfalt

Perfect Fit

Anatomic Fit

Clima Fresh



Standard-Ausführungen

Maßanfertigung	Ausschließlich
Abschluss proximal	Flache Schräge bei allen Varianten, außer AC1 Poröser gerader Abschluss: AC1
Abschluss distal	Poröser gerader Abschluss: CD, CE, CF, CG
Finger	Ohne Finger mit Daumenansatz, offene / geschlossene Finger mit Daumenansatz: AE, AF, AG, AC1, AD


Material-Zusammensetzung

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	12 %	88 %
CCL 2	16 %	84 %
CCL 3	26 %	74 %

Handteile AC1



medi Tipp:

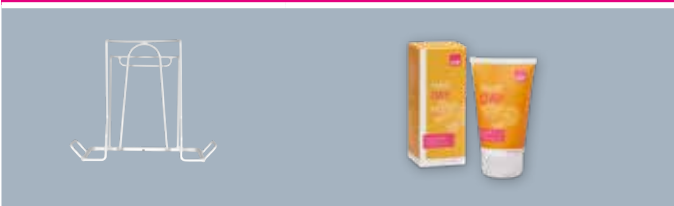

medi Butler erleichtern das Anziehen⁴

medi Haut- und Gestrickpflege bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 70

Kompressionsklasse


CCL 1, 2, 3

Ödem-Stadium




Farben

Standardfarben

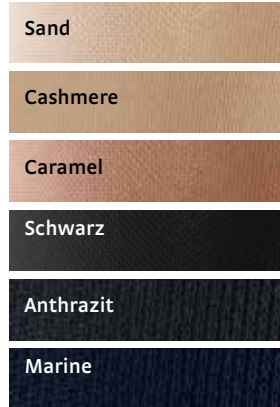


Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage

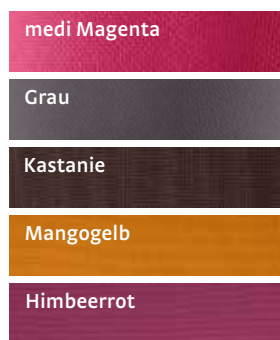

Muster³

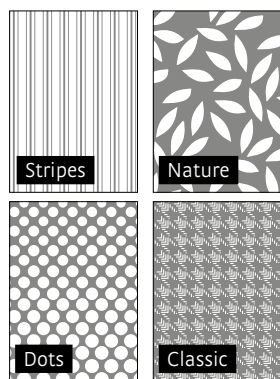

Erhältlich mit funkelnden Kristallen.



¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.

³ Die Design- und Fashion-Elemente können mit den Standard- und Trendfarben frei kombiniert werden. Die Fashion-Elemente sind gegen einen Aufpreis erhältlich.

⁴ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.03.2021)

mediven harmony®

Rundgestrickter Armstrumpf in sieben Seriengrößen.

Indikationen³

- Schulter-Armvenenthrombose
- Postoperative und posttraumatische Ödeme (Hinweis: nicht für ausgeprägte Ödeme geeignet!)

Eigenschaften

- Doppelte Ellipse im Bereich des Ellenbogens und der Ellenbeuge für
- Verminderte Faltenbildung in der Ellenbeuge, dadurch Verhinderung von Einschnürung, Druckstellen, Hautreizungen, Hautverletzungen im Beugesehenbereich und der vaskulären Strukturen
- Gewährleistung der Gelenkfunktionalität
- UV-Schutzfaktor²

Waschanleitung


Pflegeleicht  für Waschmaschine und Trockner geeignet



Umfang / Handteil (cm)

Größen	II	III	IV	V	VI	VII
cC1*	15–18	17–20	19–21,5	21–23,5	23–26	25,5–30
cC	13,5–15,5	15–18	17–20	19–21	20–23,5	22,5–27,5
cB	15,5–20	17,5–21	19,5–23	20,5–24	22,5–26	24,5–30
cA	15–19	17–20	19–22	20–23	22–25	24–29

Handteil

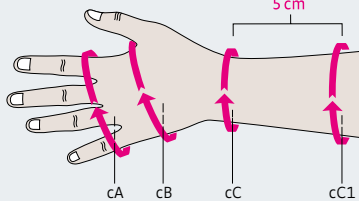

Lieferbare Varianten

AC1 Handteil ohne Finger, mit Daumenansatz | AC1 nahtloser Handschuh mit kompressiven Fingern



ohne Finger

CCL 1: Art.No.:
2Y90x02–7000
CCL 2: Art.No.:
2Y90x02–7000


mit Fingern

CCL 1: Art.No.:
2Z90x02–7000
CCL 2: Art.No.:
2Z91x02–7000

Material-Zusammensetzung Handteil

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	18%	82%
CCL 2	22%	78%

medi Tipp:

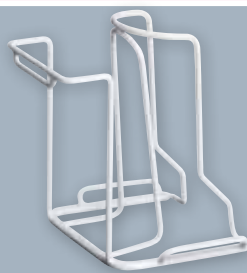

medi Butler erleichtern das Anziehen¹

Die medi Pflegeprodukte für Haut und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 92

* Maßpunkt cC1 befindet sich 5 cm oberhalb von cC

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E. et al. (2018). Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). AWMF Online (AWMF-Registernummer: 037/005).

² Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

Produkt-Vorteile



Clima Comfort



Perfect Fit



Double ellipses




Kompressionsklasse


CCL 1, 2

Standardfarben

S = Standard

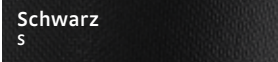

Armstrumpf

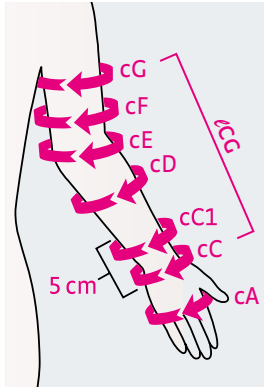

Standard styles

Farben	Sand, Caramel, Schwarz
Seriengrößen	I – VII, Standard und Extraweit
Maßanfertigung	nicht möglich
Abschluss	Noppenhaftband schmal, 2,5 cm
Handteil	ohne Finger, mit Daumenansatz

Material-Zusammensetzung

Armversorgung	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	34%	66%
CCL 2	43%	57%


Länge (cm)

Standardlänge 41 – 47

Maßpunkte mediven harmony

Varianten (alle Varianten erhältlich in den Ausführungen Standard und Extraweit)

AG kombinierter Armstrumpf

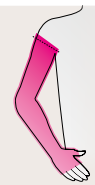

AG-Armstrumpf mit integriertem Handteil und Haftband-Abschluss



AG kombinierter Armstrumpf mit Schulterkappe



CG



CG-Armstrumpf mit Haftband-Abschluss












CG mit Schulterkappe



Armstrumpf	Größe I		Größe II		Größe III		Größe IV	
Umfang (cm)	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit
cG	25,5 – 28	28,5 – 31	28 – 30,5	30,5 – 33,5	30 – 33	33 – 36	32 – 35	35 – 38,5
cF	23,5 – 25,5	25,5 – 28	25 – 27,5	27,5 – 30	27,5 – 30	30 – 33	29,5 – 32	32 – 35
cE	23 – 25	24 – 26	24,5 – 26,5	26,5 – 29	26 – 28,5	28,5 – 31	27,5 – 30	30 – 33
cD	22 – 24	24 – 26	23 – 25	25 – 27,5	24 – 26	26 – 28,5	25 – 27,5	28 – 30,5
cC1 = 100 %*	15 – 16,5		16,5 – 18		18 – 19,5		19,5 – 21	
cC	13,5 – 14,5		14,5 – 15,5		16 – 17,5		17,5 – 19	
cA	15 – 18		16 – 19		17 – 20		19 – 22	
Armstrumpf	Größe V		Größe VI		Größe VII			
Umfang (cm)	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit
cG	33,5 – 36,5	37 – 40,5	36 – 39,5	39,5 – 43	38 – 41,5	41,5 – 45,5		
cF	31 – 34	34 – 37	33 – 36	36 – 39,5	35 – 38,5	38,5 – 42		
cE	29 – 31,5	31,5 – 34,5	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39		
cD	27 – 29,5	29,5 – 32	28,5 – 31	31 – 34	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5		
cC1 = 100 %*	21 – 23		23 – 25		25 – 27,5			
cC	19 – 20,5		20,5 – 22,5		22,5 – 24,5			
cA	20 – 23		22 – 25		24 – 27			





* Maßpunkt cC1 befindet sich 5 cm oberhalb von cC.

mediven® Armqualitäten Farbspektrum

Farbe		mediven harmony	mediven mondi esprit	mediven 550 Arm
Standardfarben				
Sand		•	•	•
Cashmere			•	•
Caramel		•	•	•
Schwarz			•	•
Anthrazit			•	•
Marine			•	•
Trendfarben (Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage)				
medi Magenta			•	•
Grau			•	•
Kastanie			•	•
Mangogelb			•	•
Himbeerrot			•	•

Alle aktuellen Standard- und Trendfarben zu unseren Armqualitäten finden Sie auch im medi e-shop.

mediven® Armqualitäten Muster

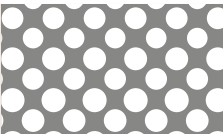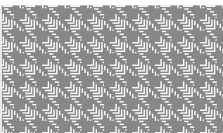Muster		mediven harmony	mediven mondi esprit	mediven 550 Arm
Stripes			•	•
Nature			•	•
Dots			•	•
Classic			•	•

Einfach medi:
Design- und Fashion-
Elemente sind für alle
Standard- und
Trendfarben erhältlich



Fashion-Element



Design-Element

Funkelnde Kristalle		mediven harmony	mediven mondi esprit	mediven 550 Arm
Motive² (Positionierung am Ober- oder Unterarm)				
Wind in Gold			•	•
Proud in Athrazit			•	•
Trio in Silber			•	•

¹ Die Design- und Fashion-Elemente können mit den Standard- und Trendfarben frei kombiniert werden.













² Die drei Motive sind mit allen Standard- und Trendfarben frei kombinierbar. Die funkelnden Kristalle sind gegen einen Aufpreis erhältlich.

mediven® Armqualitäten Zusätze

Zusatz		mediven harmony	mediven mondi esprit	mediven 550 Arm
Haftbänder				
Haftbänder 5 cm				
Noppen-Haftband			•	•
Noppen-Haftband mit Motiv			•	•
Mikronoppen-Haftband sensitiv			•	•
Flächen-Haftband Rose			•	•
Haftbänder 2,5 cm				
Noppen-Haftband		•	•	•
Haftbandstücke				
Segmente aus Noppen-, Mikronoppen- oder Flächen-Haftband • Entlang Schräge • Auf Handinnenfläche			•	•
Anti-Rutsch-Noppen				
Segmente aus Silikonoppen • Entlang Schräge • Auf Handinnenfläche			•	•
Alternative Befestigungen				
Schulterkappe				
Standard			•	•
Anatomisch			•	•
Befestigung für die Schulterkappe				
BH-Befestigung			•	•

Zusatz		mediven harmony	mediven mondi esprit	mediven 550 Arm
Befestigung für die Schulterkappe				
Schultergurt schmal / breit			•	•
Boleroverbindung			•	•
Handgelenkbefestigung				
Per Klettverschluss verstellbare Handgelenkbefestigung			•	•
Verschlüsse				
Reißverschluss			•	•
Klettverschluss			•	•
Haken-Ösen-Band			•	•
Pelotten und Futterstoff				
Lymphpad inkl. eingearbeiteter Tasche			•	•
• Lymphpad gerippt			•	•
• Lymphpad fein genoppt (Standard)			•	•
Pelotten			•	•

Tasche für Lymphpad oder Pelotte			•	•
Zusatz		mediven harmony	mediven mondi esprit	mediven 550 Arm
Pelotten und Futterstoff				
Futterstoff			•	•
Abschlüsse				
Abschluss Arm (proximal)				
Proximal flache Schräge (Standard)			•	•
Proximal steile Schräge			•	•
Proximal gerader Abschluss			•	•
Ellenbeuge				
Eingestrickte Einkehren • 160° (Standard) • 150° • 135° • Ohne Einkehren			•	•
Ellenbogen-Funktionszone				•
Doppelte Ellipse Ellipse in der Ellenbeuge und am Ellenbogen		•		
Poröse Reihen				
Kompressionsschussfaden nur in jeder zweiten Reihe			•	•

Handteil				
Finger-Varianten				
Offen			•	•
Zusatz		mediven harmony	mediven mondi esprit	mediven 550 Arm
Handteil				
Finger-Varianten				
Geschlossen			•	•
Ohne Finger • Mit Daumenansatz • Mit Daumenöffnung		•	•	•
Daumenöffnung			•	•
Daumenansatz		•	•	•
Fingerfach			•	•
Einzelne Finger nicht stricken			•	•
Nahtvarianten				
Naht mit Bandverstärkung			•	•
Kettelnaht			•	•
Etikett außen anbringen			•	•
Stumpfvarianten				
Stumpfende flach (Kreis)			•	•
Stumpfende anatomisch (Stumpfspitze)			•	•

Lymphpads

Austauschplatte und Anschauungsexemplar
Ausschließlich zur Verwendung in flachgestrickten
mediven Kompressionsstrümpfen.


Lymphpads dienen der Unterstützung bei der Therapie von Lip- und Lymphödemen mit flachgestrickten medizinischen Kompressionsstrümpfen. Mittels Unterpolsterung verteilt sich der Kompressionsdruck gleichmäßig von den prominenten Bereichen (z. B. Hand- bzw. Fußkanten oder Knöchel) in Richtung der Handflächen, der außen liegenden Vertiefungen um den Knöchel und der Bereiche seitlich der Achillessehne, um Druckspitzen zu vermeiden.

Lymphpads werden in den flachgestrickten Kompressionsstrumpf eingearbeitet, sodass sich der Kompressionsdruck des Strumpfes

- gleichmäßig auf eine größere Auflagefläche verteilt oder
- bei Bedarf punktuell erhöht.

Folgende Ausführungen stehen zur Verfügung:


- Lymphpad gerippt: Lymphödem im Bein (Standard) und Arm
- Lymphpad fein genoppt: Lymphödem im Arm (Standard) und Bein
- Lymphpad grob genoppt: Lipödem (für Oberschenkel)

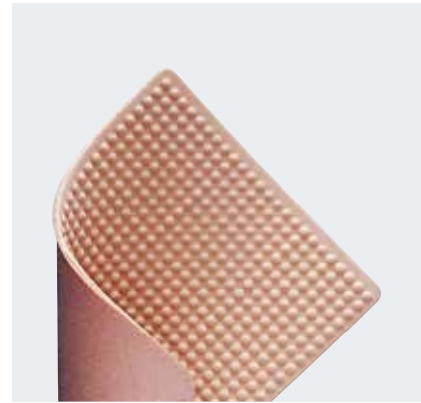

Lymphpad fein genoppt



Lymphpad gerippt

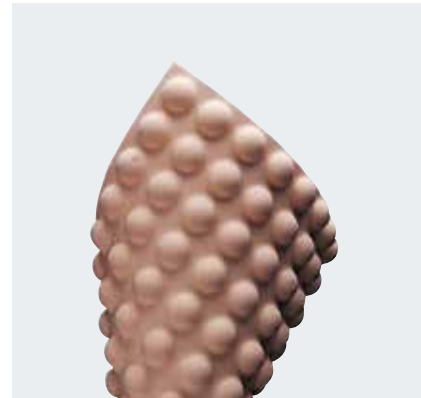

Lymphpad grob genoppt

medi Hautpflege

Bieten Sie Ihren Kunden mehr. Zum Beispiel streichelzarte Haut in der Kompressionstherapie.

Die Hautpflege-Produkte von medi besitzen zahlreiche, wohltuende Inhaltsstoffe. Sie harmonieren perfekt mit der Venentherapie und sorgen für gepflegte und gesunde Haut.

Hinweis

Der medizinische Kompressionsstrumpf steht im Mittelpunkt der Venen- und Ödemtherapie. Die richtige Hautpflege stellt dabei einen wichtigen Bestandteil dar, schließlich wird der Strumpf in der Regel täglich getragen. Das kann die Haut beanspruchen. Die Hautpflege-Produkte von medi sind speziell auf die Kompressionstherapie abgestimmt und sorgen für eine Haut in Balance.

Wichtiger Tipp für Allergiker

Alle Produkte werden höchsten Anforderungen gerecht und ohne Parabene (= Konservierungsstoffe) oder Wollwachs-Alkohole hergestellt.

Die Produkte der medi Pflege unterliegen keinem Mindesthaltbarkeits- oder Verfallsdatum. Sie sind mit einer „geöffneten Dose“ und einer Monatsangabe gekennzeichnet. Das bedeutet, sobald die Tube geöffnet wird und folglich der Inhalt Verwendung findet, sollte das Produkt innerhalb der nächsten sechs, neun oder zwölf Monate aufgebraucht werden. Dieses Zeichen wird beispielsweise auch bei Duschbädern eingesetzt.



medi Pflegeprodukte sind Kosmetikprodukte und dürfen nur auf intakter Haut angewendet werden

medi day® – Kühlende Hautpflege mit Rosskastanie

- Erfrischende und kühlende Wirkung
- Gepflegte, geschmeidige Haut
- Reduziert das Spannungsgefühl
- Unterstützt den Tragekomfort von medizinischen Kompressionsstrümpfen

50 ml Tube / 150 ml Tube / 500 ml Spender

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi day, 50 ml Tube	6er-Pack	P400025
medi day, 150 ml Tube	6er-Pack	P400026
medi day, 500 ml Spender	1 Stück	P400027



medi night – Hautpflege mit regenerierender Hamamelis

- Für wohltuende Erholung in der Nacht.
- Beruhigt die Haut und unterstützt zusätzlich die Regeneration

50 ml Tube / 150 ml Tube

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi night, 50 ml Tube	6er-Pack	P500025
medi night, 150 ml Tube	6er-Pack	P500026



medi fresh – Erfrischendes Spray mit Menthol

- Der Frische-Kick für zwischendurch.
- Unmittelbar spürbare Erfrischung
- Mehrmals tägliches Anwenden möglich
- Schonend zum Strumpfgestrick
- Leichte Handhabung im Alltag

100 ml Flasche

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi fresh, 100 ml Flasche	6er-Pack	P900026



medi day



medi night



medi fresh

*Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf www.dermatest-garantie.de

medi soft – Hautpflege mit Rosskastanie und feuchtigkeitsspendender Urea

- Sanfter Cremeschaum zur Hautpflege rund um die Uhr
- Gepflegte, geschmeidige Haut
- Reduziert das Spannungsgefühl
- Unterstützt den Tragekomfort von medizinischen Kompressionsstrümpfen
- Gibt Gestrick und Haftbändern zusätzlichen Halt

125 ml Dose

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi soft, 125 ml Dose	6er-Pack	P800026



medi soft

Therapiehilfen

medi fix

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi fix, 50 ml	6er-Pack	1023125

Klebe-Lotion für Kompressionsstrümpfe mit Trikotrand.



medi fix Soft-Roller

medi Gestrickpflege

Das spezielle Handwaschmittel von medi ist extra auf mediven Kompressionsstrümpfe abgestimmt. Es eignet sich für die tägliche Wäsche und reinigt das Gestrick schonend und effektiv. Das medi Fleckenfluid entfernt Schuhabrieb an Ferse und Fußspitze. Es wird vor der Wäsche auf die entsprechenden Stellen aufgetragen (fünf Minuten einwirken lassen).

Eigenschaften

- Schutz der Farbe
- Schonende Pflege
- Einfache Handhabung
- Geruchsneutral
- Dermatologisch verträglich



medi clean – Handwaschmittel für medizinische Kompressionsstrümpfe

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi clean, 200 ml	6er-Pack	P920026



medi clean

medi spot ex – Fleckenstift

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi spot ex, 15 ml	6er-Pack	P930025



medi spot ex

medi Wäschenetz

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi Wäschenetz	15 Stück	1020585



medi Wäschenetz

medi Gummihandschuhe

Erleichtern das Verteilen und richtige Positionieren kompressiver Gestricke am Bein beziehungsweise am Arm. Material: Naturkautschuk

Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.
Gummihandschuh	small	1 Paar	6901022000
Gummihandschuh	medium	1 Paar	6901023000
Gummihandschuh	large	1 Paar	6901024000
Gummihandschuh	small	12 Paar / Karton	6901122000
Gummihandschuh	medium	12 Paar / Karton	6901123000
Gummihandschuh	large	12 Paar / Karton	6901124000



Gummihandschuhe

medi Textilhandschuhe mit Latex

Erleichtern das Verteilen und richtige Positionieren kompressiver Gestricke am Bein beziehungsweise am Arm. Material: Polyester und Latex


Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.
Textilhandschuh	small	1 Paar	6903022000
Textilhandschuh	medium	1 Paar	6903023000
Textilhandschuh	large	1 Paar	6903024000
Textilhandschuh	small	12 Paar / Karton	6903122000
Textilhandschuh	medium	12 Paar / Karton	6903123000
Textilhandschuh	large	12 Paar / Karton	6903124000



Textilhandschuhe

Größenbestimmung für medi Gummi- und Textilhandschuhe

Bitte legen Sie Ihre rechte Hand an die eingezeichnete Linie für die innere Handkante und des Daumens. Strecken Sie die Finger dabei locker, ohne sie zu spreizen. An den eingezeichneten Markierungen können Sie die Handschuhgröße ablesen.

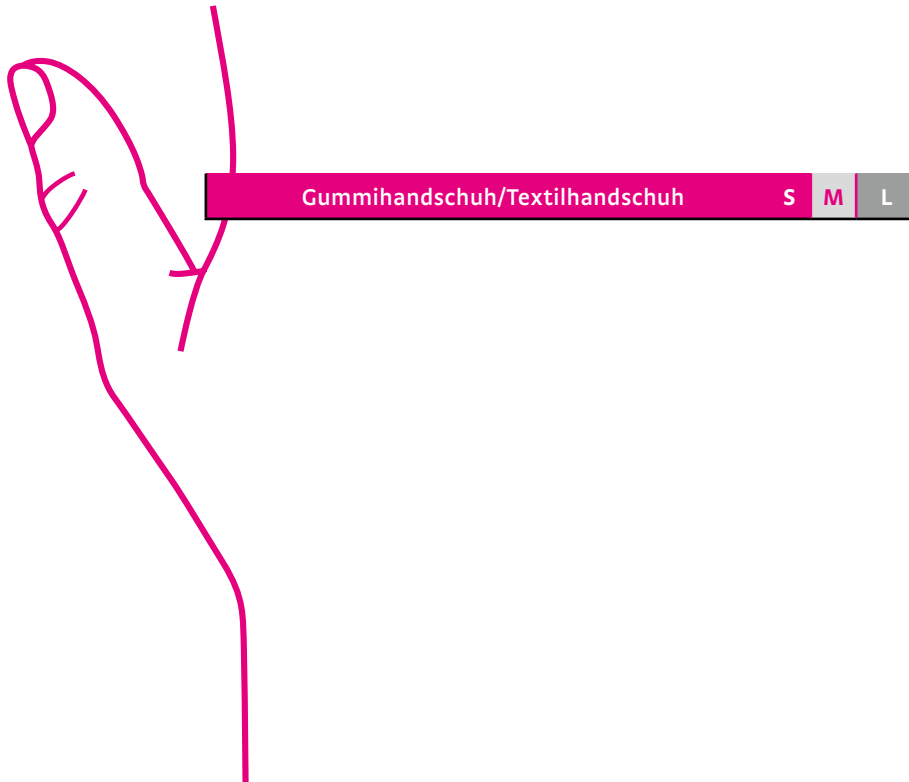

medi Butler

Anziehhilfen für medizinische Kompressionsstrümpfe.

Indikationen*

- Lähmungen
- Altersbedingte Kraftminderungen
- Arthrose / Rheuma
- Adipositas per magna
- Weitgehende Wirbelsäulen- / Hüft- / Knieversteifungen
- Degenerative Erkrankungen der Hände / im Handbereich
- Folge von Verletzungen / Amputationen

medi Lang-Griff Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Lang-Griff Butler	6900052

Für Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen

medi Big Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Big Butler	6900102

Für mehr Anziehkomfort bei großen Strumpfgrößen, empfohlen für die Größen V, VI, VII


medi Vario-Griff Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Vario-Griff Butler	6900051


Für Patienten mit Bewegungseinschränkung, Griffhöhe individuell einstellbar

medi Tipp


An- und Ausziehhilfen dienen dem Schutz und der Schonung des Strumpfmaterials und erleichtern das An- und Ausziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen. Sie ermöglichen insbesondere Patienten mit Bewegungseinschränkungen den Umgang mit den Materialien, da sie den Bewegungs- und Kraftaufwand minimieren.¹

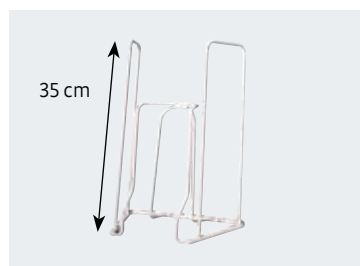

medi Lang-Griff Butler

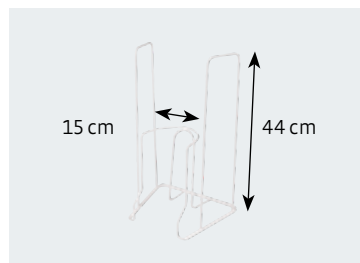

medi Big Butler

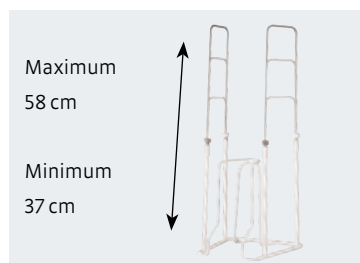


medi Vario-Griff Butler

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 04.0.2021)

medi Hosen Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Hosen Butler	6900055

Für leichtes Anziehen von Kompressionsstrumpfhosen

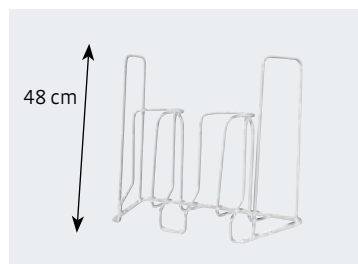

medi Hosen Butler

medi Arm Butler

Artikel	Schaftdurchmesser	Art.-Nr.
medi Arm Butler	11 cm	6900057

Erleichtert das Anlegen von Armstrümpfen ohne die Mithilfe dritter Personen.



medi Arm Butler

medi 2in1

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.
medi 2in1	für alle Strumpflängen geeignet	6900013000

- Mit der medi 2in1 gleitet der Kompressionsstrumpf mühelos über die Ferse
- Für alle Kompressionsstrumpflängen
- Für offene und geschlossene Zehen
- Strapazierfähig und reißfest
- Platzsparend zusammenzulegen und immer schnell zur Hand – zu Hause oder unterwegs



medi 2in1

medi Tipp:

Eine Studie* belegt, dass der Gebrauch einer An- und Ausziehhilfe das Anlegen der Kompressionsstrümpfe signifikant verbessert. Die Erfolgsquote stieg von 72 auf 93 Prozent. Die Probanden nahmen den Anziehvorgang leichter und angenehmer wahr. Unter den verwendeten Anziehhilfen erzielte der medi Butler mit 90 Prozent die beste Erfolgsquote beim Anlegen eines Strumpfes der Kompressionsklasse 3.

* Sippel K, Seifert B, Hafner J.: Donning devices (foot slips and frames) enable elderly people with severe chronic venous insufficiency to put on compression stockings. In: Endovasc Surg 2015;49:221-229.

medi Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe mit offener Spitze

Anziehhilfe für Strümpfe ohne Spitze

Artikel	VE	Art.-Nr.
Anziehhilfe	Einzelbezug 1 Stück	6900002
Anziehhilfe	Verkaufskarton 40 Stück	6900022



Anziehhilfe für Strümpfe mit offener Spitze

Nutzen Sie in Ihrem Arbeitsalltag die vielfältige digitale Unterstützung von medi.

zeitsparend – transparent – innovativ

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.medi.de/medigital oder direkt über den jeweiligen QR-Code oder die Short-URL.

Beratung und Bestellung

medi vision

Mit medi vision steht Ihnen ein mobiles und digitales Tool zum innovativen Maßnahmen von medizinischen Kompressionsstrümpfen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie hier:



Wenden Sie sich bei Interesse bitte direkt an Ihre medi Handelsvertretung Compression.



medi e-shop

Der medi e-shop unterstützt Sie bei der Produkt-Wahl und -Zusammenstellung. Zudem können Sie Kostenvoranschläge ohne Eingabe der Patientenmaße online generieren und Ihre Bestellungen bei medi effizient tätigen und verwalten.



Zweckbestimmung

mediven® 550 Bein,

mediven® cosy, mediven mondi®

Flachgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Lymphgefäßsystems.

mediven® 550 Arm, mediven mondi esprit®, mediven® harmony SL

Flachgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der oberen Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venen- oder Lymphgefäßsystems.

mediven® harmony

Rundgestrickte medizinische Kompressionsstrumpf zur Kompression der oberen Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venen- oder Lymphgefäßsystems..

medi Bein Butler:

Anziehhilfe für medizinische / klinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen.

medi Arm Butler:

Anziehhilfe für medizinische / klinische Kompressionsarmstrümpfe.